

SMILY

Tragbarer elektrischer Ultraschall-Zahnsteinentferner



BENUTZERHANDBUCH

Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

Von nun an können Sie für gesunde Zähne und gesundes Zahnfleisch sorgen. Der Ultraschall-Zahnreiniger kann Zahnbelag, Zahnstein, Verfärbungen und harten Zahnstein effektiv von den Zähnen entfernen und so Zahnfleischerkrankungen vorbeugen. Dieser multifunktionale Zahnsteinentferner verwendet spezielle Vibrationen, um Zahnstein von Ihren Zähnen zu entfernen und Ihr Zahnfleisch zu massieren und Ihnen jeden Morgen ein selbstbewusstes Lächeln und einen frischen Atem zu schenken!

Dieses Handbuch enthält die Sicherheitsrichtlinien und die Gebrauchsanweisung. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Produkt in Betrieb nehmen.

LIEFERUMFANG:

- 1 x Elektrischer Ultraschall-Zahnsteinentferner
- 1 x Ladekabel
- 1 x Benutzerhandbuch



PRODUKTDDETAILS

Nennspannung: 3,7 V	Arbeitsgeräte: 5
Akkukapazität: 300 mAh	Wasserbeständigkeitsklasse: IPX6
Ladezeit: Ungefähr 2 Stunden	Stil: Eingebauter Akku
Adapter: 5 V / 5 mA	Zielgruppe: Erwachsene
Standby-Strom: 20 uA	Material: Kunststoff + silikon
Nennstrom: 200 mA	medizinischer qualität
Motorgeräusch: weniger als 60 Dezibel	Einsatzumgebung: normale Temperatur
Betriebszeit: ca. 2 Stunden	

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden UND BEWAHREN SIE ES FÜR ZUKÜNFTIGE VERWENDUNG AUF.


- Dieser Zahnsteinentferner ist für zahnmedizinische Zwecke bestimmt. Er dient zur Entfernung von Zahnbelag oder Zahnstein auf Zähnen und ist auch für andere zahnärztliche Arbeiten geeignet, bei denen Ultraschallvibrationen nützlich sind. Verwenden Sie ihn nicht für nicht vorgesehene Zwecke. Wenn Sie sich bei der Anwendung unsicher sind, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Händler oder die Verkaufsstelle.
- Nur für den vorgesehenen Zweck verwenden. Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann dazu führen, dass der Benutzer schwere Verletzungen erleidet oder das Produkt beschädigt wird, möglicherweise sogar nicht mehr zu reparieren ist. Vor der Verwendung dieses Produkts sollten Sie unbedingt die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben.
- Halten Sie beim Entfernen des Zahnsteins die Spitze immer gegen die Zahnoberflächen. Vermeiden Sie unnötigen Kontakt der Spitze mit weichem Gewebe, wie z.B. Zahnfleisch, Schleimhaut oder Haut.

- Prüfen Sie die Spitze vor der Anwendung auf anormale Vibrationen. Wenn Anomalien festgestellt werden, stellen Sie die Verwendung des Zahnsteinentferners sofort ein und wenden Sie sich an den Händler.
- Lassen Sie die Spitze während der Anwendung keine Keramikprothese berühren. Dies könnte die Spitze beschädigen.
- Verwenden Sie den Zahnsteinentferner nur mit dem Original-Netzteil.
- Stellen Sie vor dem Anschließen des Adapters an eine Steckdose sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene Spannung der Stromspannung in Ihrer Steckdose entspricht.
- Der Metallkopf des Zahnreinigers ist nicht austauschbar.
- Setzen Sie den Zahnreiniger nicht der Außenumgebung, extremen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung, übermäßiger Luftfeuchtigkeit oder übermäßig staubigen Umgebungen aus.
- Verwenden Sie ihn in Innenräumen bei -10°C bis 40°C.
- Waschen Sie das Produkt nicht und weichen Sie es nicht über längere Zeit ein.
- Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch von Erwachsenen bestimmt. Bitte lagern Sie das Produkt nach Gebrauch ordnungsgemäß. Von Kindern fernhalten, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
- Dieses Produkt enthält einen Akku. Halten Sie es von Feuer oder Hochtemperaturbehältern fern, um Feuer oder Explosion zu vermeiden.
- Legen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Heizkörpern, offenem Feuer oder anderen Geräten, die Wärmequellen sind.
- Halten Sie den Zahnreiniger in einem ausreichenden Abstand zu den Augen.
- Trennen Sie den Stromadapter nicht durch Ziehen am Stromkabel von der Steckdose. Dadurch könnte das der Stromadapter oder die Steckdose beschädigt werden. Trennen Sie den Stromadapter durch Ziehen am Stecker von der Steckdose.
- Untersuchen Sie die Komponenten des Geräts immer auf Beschädigungen, bevor Sie mit der Behandlung beginnen. Beschädigte Komponenten dürfen nicht verwendet werden und müssen ersetzt werden.
- Legen Sie das Stromadapterkabel nicht über scharfe Gegenstände.
- Um zu verhindern, dass eine gefährliche Situation entsteht, sollten Sie den Zahnreiniger oder seine Zubehörteile nicht selbst reparieren oder in irgendeiner Weise modifizieren. Wenden Sie sich bei allen Reparaturen an ein autorisiertes Servicecenter. Wenn Sie das Produkt modifizieren, riskieren Sie den Verlust Ihrer gesetzlichen Rechte, die sich aus einer unbefriedigenden Leistung oder Qualitätsgarantie ergeben.
- Betreiben Sie das Gerät nicht mit einem defekten Kabel oder Stecker wenn das Gerät nicht richtig funktioniert oder heruntergefallen oder beschädigt ist.
- Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät.

- Alle Wartungs- oder Reparaturarbeiten müssen von einem autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.
- Das Produkt ist nicht zur Verwendung in der Umgebung von brennbaren Gasen geeignet.
- Verwenden Sie dieses Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.

Achtung: Verwenden Sie das Produkt nicht während des Ladevorgangs.

BESTANDTEILE

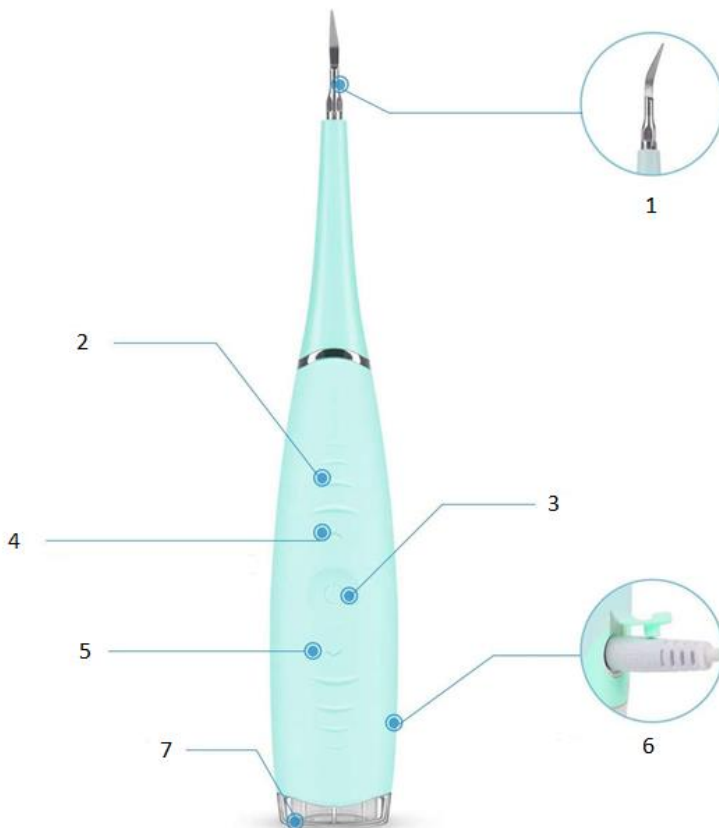

1. Reinigungskopf	5. Langsamer schalten
2. Anti-Rutsch-Streifen	6. Ladeanschluss
3. Ein / Aus Schalter	7. Ladestandanzeige
4. Schneller schalten (insgesamt 5 Stufen von oben nach unten einstellbar)	

AUFLADEN

Wiederaufladbar über USB:

Sicheres und schnelles Aufladen über USB.

1. Stecken Sie das Ladegerät in das Endstück des Zahnreinigers und schließen Sie es an das Stromnetz an, um den Ladevorgang zu starten.
2. Die Ladestandanzeige leuchtet rot und zeigt damit an, dass der Ladevorgang beginnt. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, leuchtet das Licht grün.



HINWEIS:

- Eine vollständige Aufladung dauert ca. 2 Stunden.
- Wenn der Lademodus aktiviert ist, schaltet sich der Zahnreiniger in den Aus-Modus (Gerät funktioniert während des Ladevorgangs nicht).
- Wenn das Produkt aufgeladen ist, kann es ungefähr 200 Mal verwendet werden.

Wenn Sie den Zahnreiniger zum ersten Mal aufladen oder ihn längere Zeit (länger als 3 Monate) nicht benutzt haben, kann eine vollständige Aufladung mehr Zeit in Anspruch nehmen.

- Trennen Sie den aufgeladenen Zahnreiniger vom Stromadapter und ziehen Sie den Stromadapter aus der Steckdose. Wenn Sie den Zahnreiniger vom Stromadapter trennen, erlischt die LED-Ladeanzeige.

Empfehlungen für eine möglichst lange Akkulebensdauer:

- Laden Sie das Gerät bei Raumtemperatur auf.
- Lassen Sie das Gerät nicht länger an der Stromquelle angeschlossen, als zum Laden erforderlich ist.
- Bewahren Sie das Gerät idealerweise vollständig aufgeladen auf.
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, laden Sie ihn mindestens alle 6 Monate auf.

BEDIENUNGSANLEITUNG




Dieser Reiniger wandelt elektrische Energie in Ultraschall-Vibrationsenergie um.

Drücken Sie den Netzschalter, um das Gerät einzuschalten, stellen Sie die Leistung über die obere und untere Einstelltaste ein und beginnen Sie mit der Reinigung der zu reinigenden Stellen.




Die Seite des Spitzenendes ist so an den Zahn anzusetzen, dass die Bewegung der Spitze parallel zur Zahnoberfläche erfolgt. Die vordersten 2 mm der Spitze sind am effizientesten!

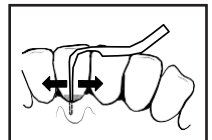

Normale Zahnsteinentfernung erfordert selten mehr als 50% Leistung. Bei schwer zu entfernendem Zahnstein kann jedoch eine höhere Leistungseinstellung erforderlich sein.

Stellen Sie sicher, dass der Kontakt zwischen der Spitze und der Zahnoberfläche während der Anwendung erhalten bleibt. Bewegen Sie die Spitze langsam hin und her und lassen Sie das Instrument die Arbeit erledigen. Verwenden Sie kurze und lange Striche, damit der Zahnstein auf der gesamten Oberfläche jedes Zahns entfernt wird.

Die Spitze ist normalerweise auf die Zahnfleischtasche gerichtet.

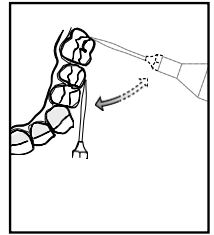

Damit die Spitze parallel zur Oberfläche jedes Zahnes arbeitet, ist es wichtig, der Anatomie des Zahnes zu folgen.



Mit der richtigen Leistungseinstellung, einem angemessenen Druck gegen den Zahn (etwa 20 Gramm, aber nicht mehr als 50) und der parallel zur Oberfläche arbeitenden Spitze wird die Behandlung sanft, leise und effizient sein.



ACHTUNG!

- **Wenn während der Behandlung ein (lautes und dominierendes) Quietschgeräusch zu hören ist, ist der Druck gegen den Zahn möglicherweise zu gering oder die Spitze nicht parallel zur Zahnoberfläche.**
- **Setzen Sie nicht zu viel Kraft mit der Hand ein. Berühren Sie die Zähne immer mit leichtem Druck.**
- **Seien Sie um den empfindlichen Zahnfleischrand herum vorsichtig.**
- **Für einige Benutzer mag es beim ersten Mal etwas schwierig sein, es zu verwenden, aber nach und nach wird es zu Ihrem unverzichtbaren Instrument für die Mundpflege!**
- **Zahnbelag und Verfärbungen sind pulverförmig. Bitte spülen Sie deshalb Ihren Mund nach dem Gebrauch aus.**
- **Bitte verwenden Sie das Instrument mit genügend Feuchtigkeit im Mund.**
- **Wenn während der Anwendung die Feuchtigkeit verloren geht, spülen Sie bitte den Mund aus.**
- **Bei Anwendung auf der Innenseite des Zahnes sollte ein Zahnarztspiegel verwendet werden.**

Nachdem Sie die Zähne gereinigt haben:

- Spülen Sie den Mund gut aus.
- Waschen Sie den Metallkopf unter fließendem sauberem Wasser.
- Wischen Sie das Gehäuse des Zahnreinigers ab.

Recycling- und Entsorgungshinweise



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern, recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Zur Rückgabe Ihres Gebrauchtgerätes nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt erworben wurde. Sie können dieses Produkt dem umweltgerechten Recycling zuführen.



Herstellereklärung, dass das Produkt den Anforderungen der zutreffenden EG-Richtlinien entspricht.

