


# JAK POUŽÍVAT

## A. příprava mycího roztoku:

1. Pouze pomocí vody vlažný (98. 6-104 F / 37-40 C) aby se zabránilo závratě nebo jinému nepohodlí.
2. Voda nebo správný poměr vody s octem nebo s peroxidem vodíku může získat dobrý výsledek.  
1 část bílý ocet a 4 díly vody nebo 1 OTC (3%) peroxid vodíku a 4 díly vody.
3. Naplňte láhev teplou vodou a připojte postřikovač. Otočte jednorázovou špičku na trysku.

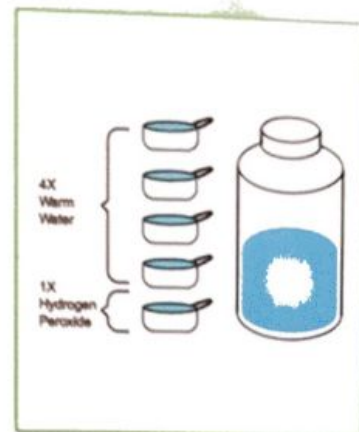

## B. kroky praní:

1. Našroubujte část postřikovače a otestujte systém pomocí postřik do umyvadla.
2. Udržujte ruce čisté. Posadte pacienta dolů, aby se zabránilo jakékoli nehody v případě závratí. I při použití teplá voda závratě je častým vedlejším účinkem.
3. Přikrýt čistý ručník přes ramena, aby se zabránilo vlhkost.
4. Umístěte umyvadlo pod ucho, které má být zavlažováno, aby se shromáždilo vypouštění vody.
5. Opatrně vložte čisticí hrot do zvukovodu a pumpujte pomalu. Měl by být mírný tlak, ale ne bolest.
6. Pohybujte špičkou v různých směrech, abyste se uvolnili blokový vosk. Zasažený vosk se nemusí okamžitě uvolnit. Počkejte prosím několik minut, dokud se zablokování nestane měkký.
7. Po zavlažování nakloňte hlavu směrem k postiženému uchu a nechte řešení vypustit z ucho.
8. Použijte ušní žárovku k odstranění přebytečné vody, která zůstala v uchu. Opakujte podle potřeby, abyste odstranili veškerý vosk.
9. Osušte a vyčistěte vnější ucho ručníkem a posadte se na několik minut k relaxaci a prevenci závratí, když vstávat.
10. Našroubujte čisticí hrot a zlikvidujte. Tipy na čištění jsou pouze pro jednorázové použití.
11. Umyjte a vyčistěte čerpadlo na láhve, hadičky a umyvadlo. Vzduch vysušte a uložte na čisté místo pro další použití.



# SADA NA ČIŠTĚNÍ UŠÍ

## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Ujistěte se, že hrot vložíte opatrně do ucha, aby nedošlo k poškození bubínek.
2. Nepoužívejte tento nástroj, pokud máte aktivní ušní infekci, prasklé ucho bubnové (bubnové membrány) nebo bubnové trubice, podráždění, vyrážka nebo zarudnutí.
3. Individuální musí zůstat sedět ve vzpřímené poloze s hlavou držel rovně, zatímco si čistil uši tímto odstraněním ušního mazu System.
4. Okamžitě přestaňte používat, pokud dojde ke krvácení, podráždění nebo jakémukoli traumatu.
5. Okamžitě přestaňte používat a vyhledejte lékařskou pomoc, kdykoli budete cítit bolest během používání.
6. Uchovávejte mimo dosah dětí.

## Poprodejní servis

Je nám potěšením slyšet od našich zákazníků. Takže pokud máte nějaké návrhy na zlepšení našich produktů. Nebo jakékoli problémy týkající se našich produktů, neváhejte nás kontaktovat.

Ještě jednou děkuji za váš nákup. Upřímně si vážíme každého zákazníka, který si nás vybral.

Prosím-přečtěte si pozorně pokyny. Nepřebíráme odpovědnost pro případ zranění, která mohou být způsobena našimi výrobky. Pokud máte ucho drenáž, výtok, bolest ucha, podráždění, vyrážka ucha, perforace ucha nebo poranění, nebo máte závratě nebo se zotavujete po operaci ucha, poraďte se s lékařem před použitím.